

Verabreichung von Zytostatika Administration of cytostatics



Impromediform®
www.imf.de



Verkauf / Sales
info@imf.de
Tel.: +49(0)2351/5506100
Fax.: +49(0)2351/5506111


Intensiv Medical Products IMPROMEDIFORM GmbH
Gielster Stück 11 • 58513 Lüdenscheld • Germany

IMF
IMPROMEDIFORM GmbH

Artikel-Nr.: MF 1595

**Transfer-Spike mit
Nadellosem Ventil**

**Transfer spike with
needle free valve**

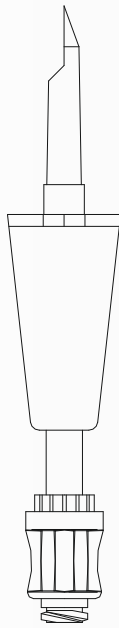

- PVC frei

- PVC-free

Adapter mit Spike Connector zur Mehrfachverabreichung von Zytostatika-Einheiten.

Adapter with spike connector for repeated administration of cytostatic units.

Für die Verabreichung von Medikamenten.

For administering of drugs.

Länge 9,5 cm

Length: 9.5 cm

Einsteckteil

-Die besondere Formgebung des Spikes ermöglicht ein leichtes Durchstechen aller üblichen Gummistopfen an Flaschen und Beuteln.

Belüftung

-Mit integriertem hydrophoben Bakterienfilter und Verschlussklappe.

Rückschlagventile

-Die Inline-Rückschlagventile verhindern ein unkontrolliertes Vermischen der Substanzen.

Farbige Klemmen

-Durch die farbige Kennzeichnung der Klemmen, können die Anschlüsse leichter zugeordnet werden.
-noDOP Schlauch
-Schlauchmaterial besteht aus PU – Polyurethan, System ist komplett Latex und DEHP frei.

Spikeport

-Sicherheitsspikeport mit Abreiblasche und Septum zum Durchstechen.
-Anschluss für die Tropfkammer aller handelsüblichen Systeme.

Piercing spike

-This unique spike design affords easy piercing of all conventional rubber stoppers on bottles and bags.

Vent

-With integrated hydrophobic bacteria filter and sealing flap.

Back check valves


-The inline back check valves prevent inadvertent mixing of drugs.

Colored clamps

-The differently colored clamps make it easier to allocate connections.
-noDOP tubing
-The tubing is made of polyurethane (PU); the system is 100% free of latex and DEHP.

Spike port

-Safety spike port with peel-off tab and septum for piercing.
-Drip chamber port fits all available systems.

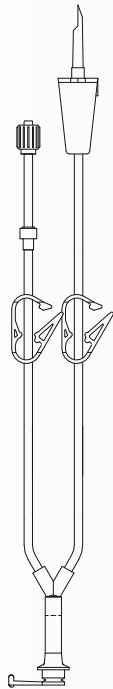Artikel-Nr.: MF 1681 / MF L681**O-Set 1+1 Luer****O-Set 1+1 Luer**

Adapter mit männlichen Luer-anschlüssen zur Mehrfach-verabreichung von Zytostatika-Einheiten im geschlossenen System über alle gängigen Infusionssysteme für Schwerkraft- oder druckbetriebene Infusionen.


Adapter with male luer connector for repeated administration of cytostatic units within the closed infusion system. Can be used with all available giving sets for gravity infusion systems or pump-driven infusions.

Für die Verabreichung von einem Medikament.

For administering of one drug.

- Lichtgeschützt (MF L681)

- light protected (MF L681)

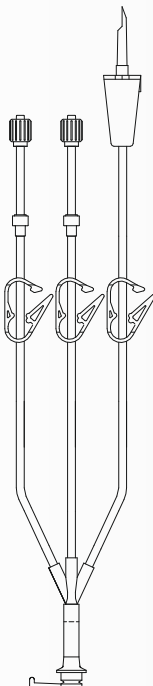Artikel-Nr.: MF 1682 / MF L682**O-Set 2+1 Luer****O-Set 2+1 Luer**

Adapter mit männlichen Luer-anschlüssen zur Mehrfach-verabreichung von Zytostatika-Einheiten im geschlossenen System über alle gängigen Infusionssysteme für Schwerkraft- oder druckbetriebene Infusionen.

Adapter with male luer connector for repeated administration of cytostatic units within the closed infusion system. Can be used with all available giving sets for gravity infusion systems or pump-driven infusions.

Für die Verabreichung von zwei Medikamenten.

For administering of two drugs.


- Lichtgeschützt (MF L682)

- light protected (MF L682)

Artikel-Nr.: MF 1683 / MF L683

O-Set 3+1 Luer

O-Set 3+1 Luer

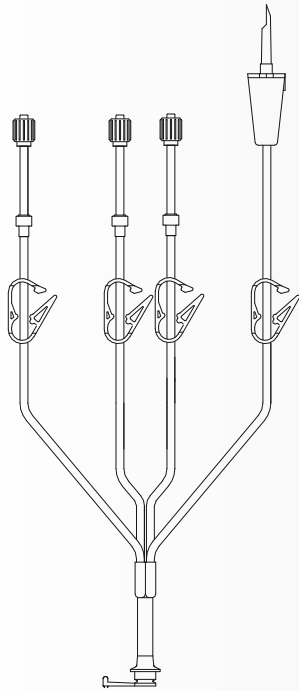

Adapter mit männlichen Luer-anschlüssen zur Mehrfach-verabreichung von Zytostatika-Einheiten im geschlossenen System über alle gängigen Infusionssysteme für Schwerkraft- oder druckbetriebene Infusionen.

Für die Verabreichung von drei Medikamenten.

- Lichtgeschützt (MF L683)

Adapter with male luer connector for repeated administration of cytostatic units within the closed infusion system. Can be used with all available giving sets for gravity infusion systems or pump-driven infusions.


For administering of three drugs.

- light protected (MF L683)

Artikel-Nr.: MF 1684 / MF L684

O-Set 4+1 Luer

O-Set 4+1 Luer

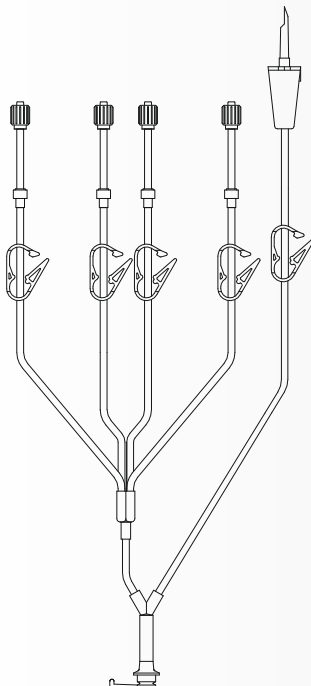

Adapter mit männlichen Luer-anschlüssen zur Mehrfach-verabreichung von Zytostatika-Einheiten im geschlossenen System über alle gängigen Infusionssysteme für Schwerkraft- oder druckbetriebene Infusionen.


Für die Verabreichung von vier Medikamenten.

- Lichtgeschützt (MF L684)

Adapter with male luer connector for repeated administration of cytostatic units within the closed infusion system. Can be used with all available giving sets for gravity infusion systems or pump-driven infusions.

For administering of four drugs.

- light protected (MF L684)

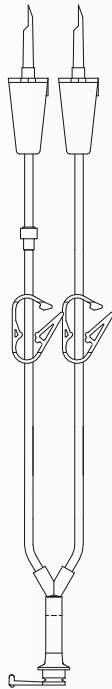Artikel-Nr.: MF 1691 / MF L691**O-Set 1 + 1****O-Set 1 + 1**

Adapter mit Spike Connector zur Mehrfachverabreichung von Zytostatika-Einheiten im geschlossenen System über alle gängigen Infusionssysteme für Schwerkraft oder druckbetriebene Infusionen.


Adapter with spike connector for repeated administration of cytostatic units within the closed infusion system. Can be used with all available giving sets for gravity infusion systems or pump-driven infusions.

Für die Verabreichung von einem Medikament.

For administering of one drug.

- Lichtgeschützt (MF L691)

- light protected (MF L691)

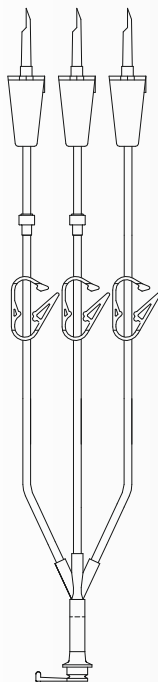Artikel-Nr.: MF 1692 / MF L692**O-Set 2 + 1****O-Set 2 + 1**

Adapter mit Spike Connector zur Mehrfachverabreichung von Zytostatika-Einheiten im geschlossenen System über alle gängigen Infusionssysteme für Schwerkraft oder druckbetriebene Infusionen.

Adapter with spike connector for repeated administration of cytostatic units within the closed infusion system. Can be used with all available giving sets for gravity infusion systems or pump-driven infusions.

Für die Verabreichung von zwei Medikamenten.

For administering of two drugs.


- Lichtgeschützt (MF L692)

- light protected (MF L692)

Artikel-Nr.: MF 1693 / MF L693

O-Set 3+1

O-Set 3+1

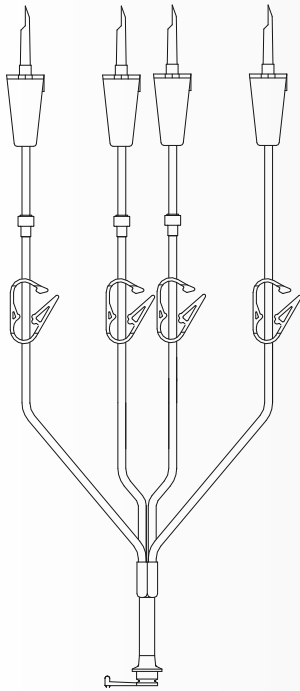

Adapter mit Spike Connector zur Mehrfachverabreichung von Zytostatika-Einheiten im geschlossenen System über alle gängigen Infusionssysteme für Schwerkraft oder druckbetriebene Infusionen.

Für die Verabreichung von drei Medikamenten.

- Lichtgeschützt (MF L693)

Adapter with spike connector for repeated administration of cytostatic units within the closed infusion system. Can be used with all available giving sets for gravity infusion systems or pump-driven infusions.


For administering of three drugs.

- light protected (MF L693)

Artikel-Nr.: MF 1694 / MF L694

O-Set 4+1

O-Set 4+1

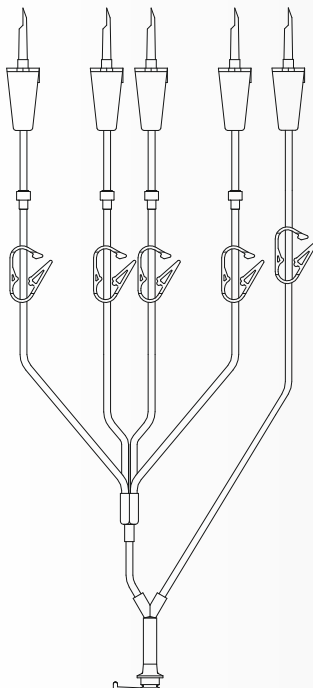

Adapter mit Spike Connector zur Mehrfachverabreichung von Zytostatika-Einheiten im geschlossenen System über alle gängigen Infusionssysteme für Schwerkraft oder druckbetriebene Infusionen.


Für die Verabreichung von vier Medikamenten.

- Lichtgeschützt (MF L694)

Adapter with spike connector for repeated administration of cytostatic units within the closed infusion system. Can be used with all available giving sets for gravity infusion systems or pump-driven infusions.

For administering of four drugs.

- light protected (MF L694)

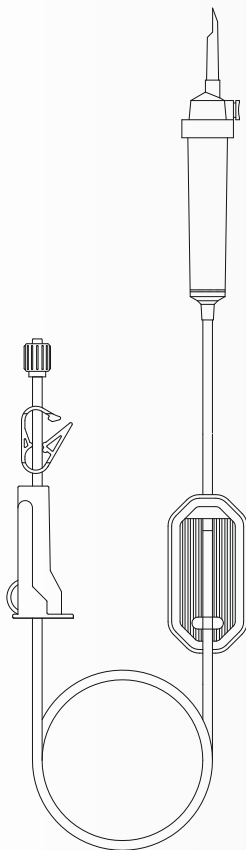

Artikel-Nr.: MF 8881

Infusionsleitung für Taxol® mit 0,2µm Bakterienfilter

- PVC frei
- Schlauchmaterial MPE
- Infusionsfilter 0,2µm Supor

Die Infusionsleitung ist druckfest und PVC frei.

Der für die Taxolgabe empfohlene 0,2µm Filter enthält einen Luftabscheider und ist mit einer 0,2µm Supormembrane versehen.

Das Infusionsschlauchmaterial aus Polyethylen (Metallocen Polyethylen: MPE) hält den Wirkstoff Paclitaxel nicht in nennenswerter Menge zurück.

Länge 160 cm


Infusion line for Taxol® with 0.2 µm bacteria filter

- PVC-free
- tube is made of MPE
- 0.2 µm Supor infusion filter

The infusion line is pressure-proof and free of PVC. The recommended 0.2 µm filter for administering Taxol consists of an air separator and is provided with a 0.2 µm Supor membrane.

The infusion tube is made of Polyethylene (Metallocen Polyethylene: MPE) which does not keep back the Paclitaxel agent. The retaining value is practically negligible.

Length: 160 cm

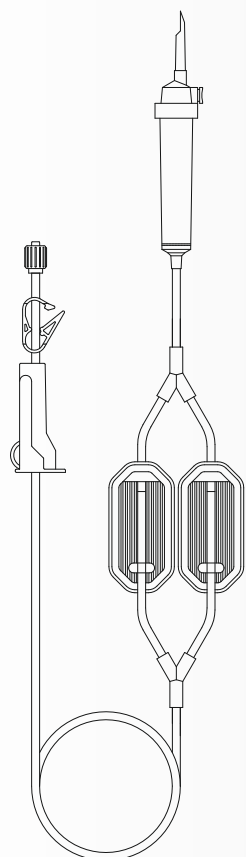

Artikel-Nr.: MF 8882

Infusionsleitung für Taxol® mit 0,2µm Doppelfilter

- PVC frei
- Schlauchmaterial MPE
- Infusionsfilter 0,2µm Supor

Die Infusionsleitung ist druckfest und PVC frei.

Der für die Taxolgabe empfohlene 0,2µm Filter enthält einen Luftabscheider und ist mit einer 0,2µm Supormembrane versehen.

Für schnelle Applikationszeiten wird das System mit zwei parallelen 0,2µm Filter angeboten. Die Infusionszeit für Schwerkraftinfusionen wird dadurch halbiert. Das Infusionsschlauchmaterial aus Polyethylen (Metallocen Polyethylen: MPE) hält den Wirkstoff Paclitaxel nicht in nennenswerter Menge zurück.

Länge 160 cm

Infusion line for Taxol® with 0.2 µm double filter

- PVC-free
- tube is made of MPE
- 0.2 µm Supor infusion filter

The infusion line is pressure-proof and free of PVC. The recommended 0.2 µm filter for administering Taxol consists of an air separator and is provided with a 0.2 µm Supor membrane.

For quick applications the system is offered with 2 parallel 0.2 µm filters. Thus, the infusion time of gravity infusions is halved. The infusion tube is made of Polyethylene (Metallocen Polyethylene: MPE) which does not keep back the Paclitaxel agent. The retaining value is practically negligible.

Length: 160 cm